

# GLOX

# A8

masážní pistole



**návod k použití**

Vážený zákazníku,

děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřeby. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu. Pokud máte k přístroji jakékoli dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

## POKYNY K BATERII

- **Doba nabíjení:** Když je baterie vybitá, je třeba ji nabíjet přibližně 2-3 hodiny, aby se plně nabila.
- **Výdrž baterie:** Výdrž jedné baterie závisí na síle přtlaku, která se může během používání lišit.
- **Doba používání** se pohybuje od 5 do 8 hodin.
- **Nabíjecí zařízení:** Při nabíjení baterie použijte speciálně přiložený nabíjecí kabel určený pro tento přístroj. Ujistěte se, že spolupracuje s 5V napětím, které splňuje požadované standardy.
- **Adaptér:** Používejte 15W adaptér pro nabíjení zařízení.
- **Zobrazení nabíjení:** Během nabíjení se na displeji zobrazuje aktuální úroveň nabití baterie.
- **Signalizace nabíjení:** U třítláčtkového modelu bliká světlo na displeji během nabíjení.
- **Dokončení nabíjení:** Když baterie zobrazuje symbol „–“, nabíjení je dokončeno.  
Pro vaši bezpečnost nezačínejte nabíjení znovu.
- **Akumulátor není určen k výměně uživatelem.** Po skončení životnosti musí být výrobek odevzdán na sběrné místo elektroodpadu.

## NÁVOD NA POUŽITÍ

**Upozornění:** Je důležité mít na paměti, že při jakémkoli cvičení nebo terapeutické aktivitě existuje riziko fyzického zranění. Každý cvičební program, včetně tohoto, může způsobit úraz. Před zahájením tohoto nebo jakéhokoli jiného cvičebního či terapeutického programu se doporučuje konzultace s lékařem.

- Před použitím vložte masážní hlavu do předního otvoru zařízení.
- Hloubková masáž může rychle zmírnit bolest, burzitidu, svalové křeče, neuralgii a další onemocnění kosterního svalstva.
- Téměř všechna onemocnění měkkých tkání souvisejí s traumatem, nadměrným používáním svalů nebo abnormálním držením těla.
- Opatření při používání:
  - Vyvarujte se nadměrnému tlaku a dlouhodobé fyzikální terapii.
  - Vyhýbejte se citlivým oblastem, jako je hlava, obličej a krční páteř.
  - Pokud se objeví zánět, otok nebo zhoršení bolesti, okamžitě přestaňte zařízení používat.
- Současný výzkum se zabývá účinkem vibračního tréninku na specifické lékařské nemoci, což může snížit počet kontraindikací.
- Kombinace vibračního tréninku s fyzikální terapií je často doporučována, ale měla by být prováděna na základě rady nebo v přítomnosti lékaře, specialisty nebo fyzioterapeuta.  
Správná regenerace a odpočinek jsou klíčové pro odstranění svalové únavy a obnovu síly.

## FUNKCE

### Pohotovostní režim:

- **Zapnutí zařízení:** Stiskněte a podržte tlačítko napájení na obrazovce po dobu 2 sekund. Displej poté ukáže první dvě číslice, které indikují sílu a zobrazí „00“. Poslední dvě číslice označují aktuální stav nabití baterie.

### Přepínání rychlosti:

- **Zvýšení rychlosti:** Ve stavu pohotovosti stiskněte tlačítko „+“, čímž se rychlost zvýší o jeden stupeň. Celkem je k dispozici 99 rychlostí. Dlouhým stisknutím tlačítka „+“ dosáhnete rychlého zvýšení otáček.
- **Snížení rychlosti:** Stisknutím tlačítka „-“ se rychlost sníží o jeden stupeň, přičemž minimální rychlost je 01. Dlouhým stisknutím tlačítka „-“ se rychlost okamžitě sníží.

### Zobrazení napájení:

- **Aktuální stav napájení:** Poslední dvě číslice na displeji ukazují aktuální stav napájení, kde plné napájení je 99. Hodnota se mění podle spotřeby energie a minimální výkon klesne až na 20. Pokud se zobrazí „00“, znamená to, že výkon stroje je nedostatečný a je třeba jej nabít.


### Vypnutí zařízení:

- Když je stroj v provozu, dlouze stiskněte tlačítko napájení pro vypnutí. Proces vypnutí bude dokončen.

### Funkce časové ochrany:

- **Automatické vypnutí:** Stroj má funkci časové ochrany, která způsobí automatické vypnutí každých 15 minut. Pokud potřebujete zařízení znovu použít, prosím, restartujte jej.

## INDIKACE FUNKCE

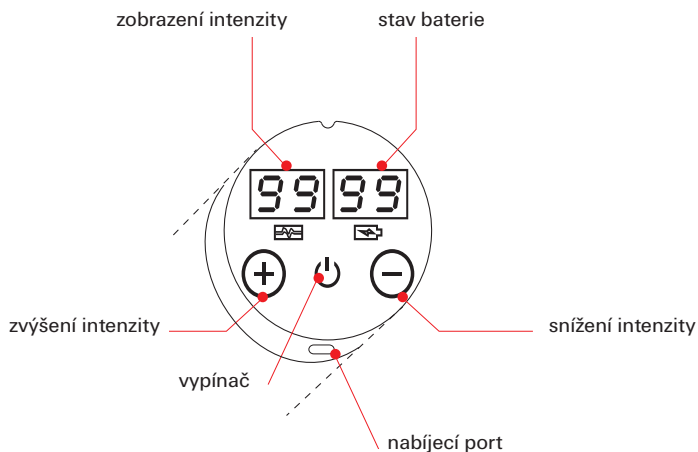

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Problém                                                                             | Možná příčina                                          | Řešení problému                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|  | Ochrana proti přetížení pistole                        | Stiskněte jakékoli tlačítko                          |
| Nelze zapnout<br>černá obrazovka                                                    | Ochrana proti přetížení pistole,<br>nebo slabá baterie | Připojte přístroj k nabíjecímu<br>zařízení. Nabijte. |

## VAROVÁNÍ:

- Použijte speciálně přibalený USB kabel s 5V napájecím adaptérem pro nabíjení produktu.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným krytem nebo nesprávným napětím, aby nedošlo k poškození jednotky.
- Nedotýkejte se nabíjecího kabelu a adaptéru mokřými rukama a netahejte za kabel při odpojování nabíječky.
- Vyvarujte se kontaktu s produktem nebo nabíječkou mokřými rukama, abyste předešli zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte používat adaptér, pokud je vystaven dešti, kapalině nebo je silně vlhký.
- Tento produkt není určen pro lékařské účely, slouží pouze k osobní masáži.
- Určité osoby, jako jsou ty s kardiostimulátorem, srdečními chorobami, těhotné ženy, osoby s onemocněním zad, zlomeninami, osteoporózou, kloubními onemocněními, zhoubnými nádory, kožními poraněními nebo ekzémem, s cukrovkou s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, hernie plotének, spondylolýza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů, nitroděložních tělísek, kovových čepů nebo destiček nebo pokud existují jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví by neměly produkt používat. Pokud máte zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo blízko topných zařízení, jako je sluneční záření nebo topidla, aby nedošlo k přehřátí a výbuchu.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterie, nevkládejte cizí předměty a neponořujte je do vody, aby nedošlo k úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez autonomie obsluhovat a používat tento produkt. Umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu. Lze použít přes oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po kůži, maximálně 60 sekund na každou část.
- Nepoužívejte na vrcholu hlavy nebo na tvrdých částech těla s kostmi. Pokud necítíte bolest nebo nepohodlí, používejte pouze na měkké tkáně těla.
- Nepoužívejte v oblastech s modřinami, bolestí nebo nepohodlím.
- Nestůjte ani nesedejte přímo na výrobek, aby nedošlo k pádu.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a zkrátit životnost produktu. Nechte výrobek vychladnout před opakovaným použitím.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna, a nevkládejte produkt do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte výrobek blízko zdrojů tepla, nebo na přímém slunečním světle.
- Nepoužívejte přístroj během bouřky.
- Nevkládejte ani neupouštějte předměty do žádných otvorů výrobku.
- Nepřikrývejte masážní přístroj během používání, aby nedošlo k poruše způsobené zvýšením teploty motoru.
- Nedovolte, aby se prsty, vlasy nebo jiné části těla přiblížily k hřídeli a zadní části vibrační hlavy, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Nepoužívejte na oblast srdce, přední část krku, páteřní výběžky ani přímo na klouby.

## ÚDRŽBA

1. **Povrch zařízení otřete jemně vlhkým ručníkem** a následně jej osušte měkkým hadříkem. Tím zajistíte, že na povrchu nezůstanou žádné stopy vlhkosti.
2. **Při dlouhodobém skladování nebo cestování uložte produkt do původní krabice.** Dbejte na to, aby zařízení zůstalo suché, což pomůže ochránit jej před poškozením a zachovat jeho funkčnost.

| SPECIFIKACE                 |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Název produktu              | Masážní pistole        |
| Model produktu              | A8                     |
| Jmenovité napětí            | 7,4V                   |
| Jmenovitý výkon             | 18W                    |
| Nabíjecí napětí             | 5V                     |
| Nabíjecí proud              | 2A                     |
| Vestavěný Li-Ion akumulátor | 7,4V / 1 800 mAh       |
| Doba nabíjení               | 2-3 hodiny             |
| Výdrž baterie               | 5-8 hodin              |
| Nastavitelné úrovně         | 99 úrovní              |
| Amplituda                   | 10 mm                  |
| Rozsah otáček               | 2 800 - 3 200 ot./min. |
| Hlučnost                    | <45 db                 |
| Hmotnost                    | 657 g                  |

## OBSAH BALENÍ

- 8 typů masážních nástavců
- Masážní pistole GLOX A8
- Nabíjecí kabel USB C

## POPIS A VYUŽITÍ MASÁŽNÍCH HLAVIC



### Nástavec Kulička

vhodné pro masáž paží a dolních částí zad, velkých svalových skupin, jako hýždě, stehna, lýtky



### Nástavec Půlměsíc

vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiánové body dlaní a chodidel atd.



### Nástavec Drápy

vhodné pro uvolnění měkkých tkání a citlivé pokožky



### Nástavec „U“

vhodné pro masáž krku souběžně na obou stranách páteře a pro masáž Achillovy šlachy



### Nástavec plochý

vhodné pro masáž celého těla s uvolněním svalů



### Nástavec „T“

procvičování a relaxace břišních svalů, paží a stehenní linie



### Nástavec Nábojnice

vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiány, klouby, dlaně, chodidla



### Nástavec malá kulička

vhodné pro hloubkovou masáž meridiánových akupunkturních bodů



## WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:

**Opravy a servis:** V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

### Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

**Nesprávné použití:** Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

**Poškození:** Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

**Opotřebení:** Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

**Vnější vlivy:** Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

**Úpravy a modifikace:** Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

.....  
Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín

[servis@laser-cut.cz](mailto:servis@laser-cut.cz)

+420 777 307 776

## Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.

4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Fascial gun/Masážní pistole

Model/typ: **A8 GLOX**

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnících.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:



Robert Fiala, Jednatel společnosti

18. června 2026 - Vsetín

Podpis

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala R', is written below the printed name.

## Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

|                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Nebezpečí!</b><br>Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem. |  | Značka pro identifikaci obalového materiálu:<br>A - zkratka materiálu<br>B - číslo materiálu<br>1-7 plasty<br>20-22 papír a lepenka |
|  | Přečtěte si pokyny.                                                                                                                           |  | Informace o výrobku<br>Upozornění na důležité informace.                                                                            |
|  | Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)                                                          |  | Označení CE<br>Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.                                             |
|  | Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.                                                                               |  | Značka posuzování shody pro Velkou Británii                                                                                         |
|  | Výrobce                                                                                                                                       |  | Symbol dovozce                                                                                                                      |

|                                                                                    |                                                                          |                                                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | Součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy. |   | Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.                      |
|  | Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.                |  | Přístroj třídy ochrany II<br>Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II. |

|                                                                                                       |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>NEBEZPEČÍ</b>  | Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.                |
|  <b>VAROVÁNÍ</b>   | Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.                   |
|  <b>POZOR</b>      | Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.                   |
|  <b>UPOZORNĚNÍ</b> | Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí. |

