


MASÁŽNA PIŠTOL'

Návod na použitie

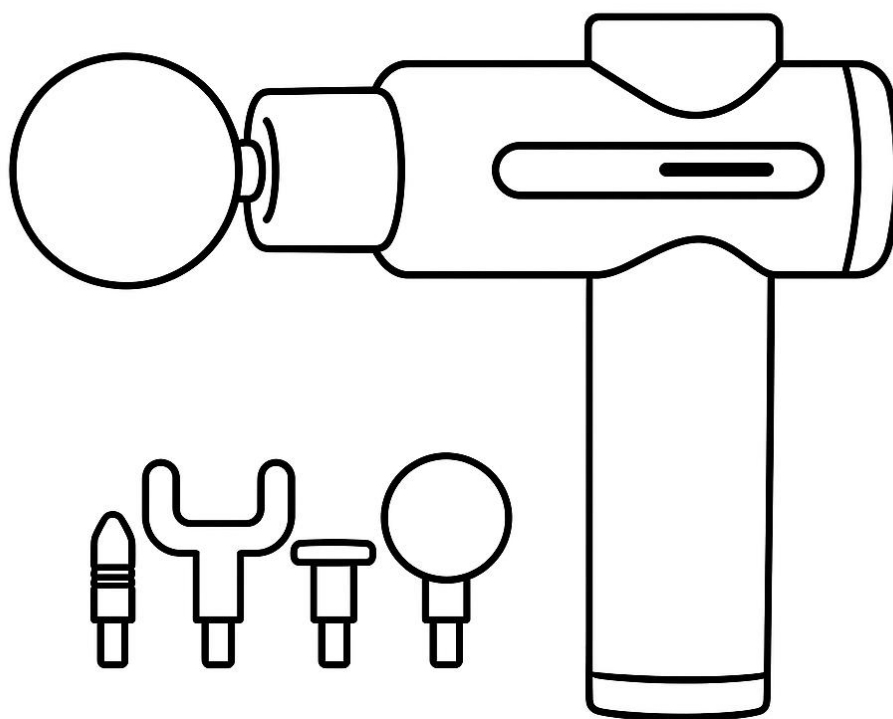

Model: GLOX 750

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Vážime si vašu dôveru a dufame, že budete s naším výrobkom spokojní.

Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce potreby.

Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu.

Pokiaľ máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.


Údržba



Varovanie

- Použite špeciálne priložený USB kábel s 5V napájacím adaptérom na nabíjanie produktu.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným krytom alebo nesprávnym napätím, aby nedošlo k poškodeniu jednotky.
- Nedotýkajte sa nabíjacieho kábla a adaptéra mokrými rukami a neťahajte za kábel pri odpájaní nabíjačky.
- Vyvarujte sa kontaktu s produktom alebo nabíjačkou mokrými rukami, aby ste predišli skratu, poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Prestaňte používať adaptér, ak je vystavený dažďu, kvapaline alebo je silne vlhký.
- Tento produkt nie je určený na lekárske účely, slúži len na osobnú masáž.
- Určité osoby, ako sú tie s kardiostimulátorom, srdcovými chorobami, tehotné ženy, osoby s ochorením chrbta, zlomeninami, osteoporózou, kĺbovými ochoreniami, zhubnými nádormi, kožnými poraneniami alebo ekzémom, s cukrovkou s komplikáciami, ako je neuro, migrény, hernie platničiek, spondylolistéza, spondylolýza alebo spondylóza, nedávna náhrada kĺbov, vnútromaternicových teliesok, kovových čapov alebo doštičiek alebo ak existujú akékoľvek obavy o vaše fyzické zdravie by nemali produkt používať. Ak máte zdravotné problémy, konzultujte použitie s lekárom.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám alebo blízko vykurovacích zariadení, ako je slnečné žiarenie alebo ohrievače, aby nedošlo k prehriatiu a výbuchu.
- Nerozoberajte ani neupravujte batérie, nevkladajte cudzie predmety a neponárajte ich do vody, aby nedošlo k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batérie by mali byť bezpečne zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
- Nedovoľte deťom alebo osobám bez autonómie obsluhovať a používať tento produkt. Umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Používajte iba na suchom a čistom povrchu. Možno použiť cez oblečenie, jemne pritlačte a pohybujte po koži, maximálne 60 sekúnd na každú časť.
- Nepoužívajte na vrchole hlavy alebo na tvrdých častiach tela s kosťami. Ak necítite bolesť alebo nepohodlie, používajte iba na mäkké tkanivá tela.
- Nepoužívajte v oblastiach s modrinami, bolesťou alebo nepohodlím.
- Nestojte ani nesadajte priamo na výrobok, aby nedošlo k pádu.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a skrátiť životnosť produktu. Nechajte výrobok vychladnúť pred opakovaným použitím.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa, a nevkladajte produkt do vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte výrobok blízko zdrojom tepla, alebo na priamom slnečnom svetle.
- Nepoužívajte prístroj počas búrky.
- Nevkladajte ani neupúšťajte predmety do žiadnych otvorov výrobku.
- Neprikrývajte masážny prístroj počas používania, aby nedošlo k poruche spôsobenej zvýšením teploty motora.
- Nedovoľte, aby sa prsty, vlasy alebo iné časti tela priblížili k hriadeľu a zadnej časti vibračnej hlavy, aby nedošlo k ich zachyteniu.

Indikácia funkcie

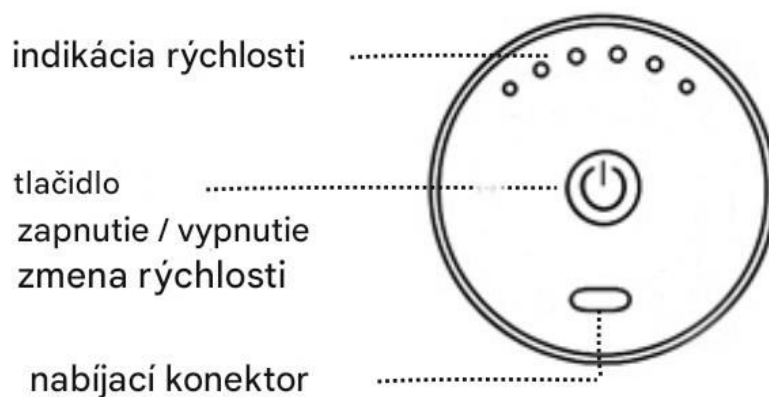

Funkcia

- **Zapnutie zariadenia :**
 - Stlačte tlačidlo napájania.
 - Kontrolka sa rozsvieti a zariadenie sa spustí.
- **Prepínanie rýchlostí :**
 - Po spustení krátko stlačte tlačidlo napájania pre zvýšenie rýchlosti.
 - Pokračujte v krátkom stlačení, kým nedosiahnete najvyšší stupeň.
- **Vypnutie zariadenia :**
 - Ak je zariadenie nastavené na 6. rýchlostný stupeň, krátko stlačte tlačidlo napájania pre vypnutie.
 - Pre vypnutie v akomkoľvek rýchlostnom stupni, dlho stlačte tlačidlo napájania.
 - Kontrolka zhasne, čo signalizuje vypnutie zariadenia.
 - Zariadenie sa automaticky vypne po 15 minútach prevádzky. Pre opätovné použitie stlačte znovu tlačidlo napájania.

OPIS A VYUŽITIE MASÁŽNYCH HLAVÍC

Okrúhla masážna hlavica




- **Univerzálne použitie:** Táto hlavica je ideálna na masáž takmer všetkých svalových partií na tele. Vďaka svojmu okrúhlemu tvaru sa ľahko prispôsobuje anatómii tela, čo umožňuje efektívnu masáž veľkých povrchových svalových skupín.
- **Flexibilné použitie:** Je vhodná na použitie ako pred, tak aj po cvičení, a tiež kedykoľvek počas dňa, kedy potrebujete uvoľniť svalové napätie alebo stimulovať jednotlivé svalové skupiny.
- **Podpora regenerácie:** Pomáha pri jemnom uvoľnení svalových tkanív, podporuje regeneráciu a stimuluje jednotlivé body, čo môže prispieť k celkovému zlepšeniu svalovej kondície.
- **Intenzita masáže:** Vhodná pre intenzitu 1-5, čo umožňuje prispôbiť masáž podľa individuálnych potrieb a preferencií.
Táto masážna hlavica je ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá efektívny nástroj na svalovú regeneráciu a uvoľnenie.

Plochá hlavica




- **Univerzálne použitie:** Ideálne pre masáž takmer všetkých svalových skupín, čo z nej robí skvelý doplnok pre každodennú starostlivosť o telo.
- **Plochý dizajn:** Vďaka svojmu plochému tvaru poskytuje rovnomerný tlak, čo je ideálne na stimuláciu svalov a mäkkých tkanív, najmä v oblastiach blízko kostí a kĺbov.
- **Flexibilné použitie:** Možno ju používať ako pred, tak po cvičení, ale aj kedykoľvek počas dňa, čo zaisťuje maximálne pohodlie a prispôbenie vašim potrebám.
- **Podpora regenerácie:** Pomáha jemne uvoľňovať svalové tkanivo, podporuje regeneráciu a stimuluje jednotlivé body, vrátane mäkkých tkanív v oblasti kĺbov.

Vidlicová hlavica

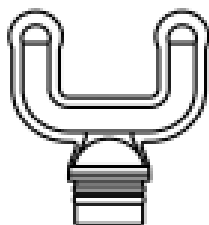

- **Využitie:** Ideálne pre nepriamu masáž a stimuláciu vedľajších bodov priliehavých svalov a hlbokých svalových vrstiev. Je efektívny najmä pre oblasti ako sú trapézy, Achillovej šľachy, lýtka, zadok, krčná chrbtica, rebrá a krčné stavce.
- **Čas použitia:** Možno ju používať ako pred, tak po cvičení, ale aj kedykoľvek počas dňa na uvoľnenie a relaxáciu svalov.
- **Funkcia:** Pomáha k jemnému uvoľneniu svalových tkanív, podporuje regeneráciu a stimuluje vedľajšie a hlbkové body, čo prispieva k celkovému zlepšeniu svalovej kondície.
- **Intenzita:** Odporúčaná intenzita použitia je v rozmedzí 1–3, čo je ideálne na dosiahnutie optimálnych výsledkov bez nadmerného zaťaženia svalov.
Poznámka: Vidlicová hlavica je navrhnutá tak, aby poskytovala neutrálny a efektívny masážny zážitok, ktorý je vhodný pre rôzne typy užívateľov a rôzne potreby svalovej relaxácie.

Hrotová hlavica

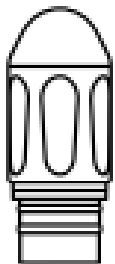

- **Priama bodová masáž :** Ideálna pre stimuláciu hlbokých svalových vrstiev a pre dosiahnutie ťažko dostupných miest na tele.
- **Všestranné použitie :** Vhodná pre masáž oblastí ako je klenba chodidiel, zápästia, dlane, svaly chrbta, trapézy, krčné svaly, predlaktia a lýtka.
- **Časová flexibilita :** Môže byť použitá pred cvičením, po cvičení alebo kedykoľvek počas dňa pre uvoľnenie svalového napätia a podporu regenerácie.
- **Cielená svalová terapia :** Pomáha pri masáži svalov a mäkkých tkanív, podporuje regeneráciu a stimuluje ťažko dostupné body.
- **Odporúčaná intenzita :** Najvhodnejšia pre použitie na intenzite 1–2, čo je ideálne pre neutrálny tón masáže, ktorá je šetrná k telu a zároveň efektívna.
Táto hrotová hlavica je vynikajúcim nástrojom pre každodennú starostlivosť o svaly, či už ste športovec, alebo hľadáte úľavu od bežného svalového napätia.

Údržba

1. **Povrch zariadenia utrite jemne vlhkým uterákom** a následne ho osušte mäkkou handričkou. Tým zaistíte, že na povrchu nezostanú žiadne stopy vlhkosti.
2. **Pri dlhodobom skladovaní alebo cestovaní uložte produkt do pôvodnej krabice** . Dbajte na to, aby zariadenie zostalo suché, čo pomôže ochrániť ho pred poškodením a zachovať jeho funkčnosť.

Pokyny k batérii

- **Nabíjanie batérie** : Keď je batéria vybitá, je nutné ju nabíjať približne **3 hodiny** , aby sa plne nabila.
- **Doba použitia** : Doba, počas ktorej môžete zariadenie používať, závisí od kapacity batérie a môže byť až **4 hodiny** v závislosti na úrovni tlaku, ktorý používate.
- **Použitie nabíjacieho kábla** : Pri nabíjaní batérie použite **špeciálny nabíjací kábel** , ktorý je dodávaný so zariadením. Spolu s ním použite adaptér s parametrami **5V** a výkonom **nepresahujúcim 15W** , ktorý spĺňa národné štandardy pre nabíjanie zariadenia.
- **Indikátor nabíjania** : Pri nabíjaní modelu s **jedným tlačidlom** sa na paneli produktu rozsvieti **červené svetlo indikátora nabíjania** . Hneď ako je batéria plne nabitá, červené svetlo zhasne.

Pokyny na použitie masážneho zariadenia

- **Inštalácia masážnych hlavíc** : Pred použitím vložte masážne hlavice do predného otvoru zariadenia. K dispozícii je niekoľko typov hlavíc, ktoré je možné ľahko meniť podľa potreby.
- **Účinky a využitie zariadenia** :
 - **Hlboká penetrácia** : Masážne zariadenie môže rýchlo zmierniť bolesť, burzitídu, svalové kŕče, neuralgiu a ďalšie ochorenia kostrového svalstva spôsobené podvrtnutím kĺbu.
 - **Liečba mäkkých tkanív** : Väčšina problémov mäkkých tkanív je spojená s traumou, nadmerným používaním svalov alebo zlým držaním tela. Zariadenie môže pomôcť pri liečbe jazvového tkaniva.
- **Bezpečnostné pokyny** :
 - **Vyhňte sa nadmernému tlaku** : Pri používaní zariadenia nepoužívajte nadmerný tlak a vyvarujte sa dlhodobej fyzikálnej terapie.
 - **Citlivé oblasti** : Vyhňte sa aplikácii na citlivé oblasti, ako je hlava, tvár a krčná chrbtica.
 - **Prerušenie používania** : Pokiaľ dôjde k zápalu, opuchu alebo zhoršeniu bolesti, okamžite prestaňte zariadenie používať.
- **Súčasný výskum a odporúčania** :
 - **Vibračný tréning** : Aktuálny výskum skúma účinky vibračného tréningu na špecifické lekárske ochorenia, čo môže viesť k zníženiu počtu kontraindikácií.
 - **Kombinácia terapií** : V mnohých prípadoch sa odporúča kombinovať vibračný tréning s fyzikálnou terapiou. Toto by malo byť vykonávané na základe odporúčania lekára, špecialistu alebo fyzioterapeuta.

Špecifikácia

Model	750
Menovité napätie	7,4V
Menovitý výkon	18W
Nabíjacie napätie	5V
Nabíjací prúd	2A
Kapacita batérie	1200mAh
Doba nabíjania	2-3 hodiny
Výdrž batérie	až 4 hodiny
Nastaviteľné úrovne	6 úrovní
Hmotnosť	1.100 kg

Obsah balenia

- Masážna pištoľ GLOX 750
- 4 masážne nástavce
- Kábel USB
- Prenosný kufrík

Riešenie problémov

Model	Jav	Dôvod	Riešenie problémov
Jendo tlačidlo šesť rýchlostí	Nechce sa zapnúť	Ochrana proti preťaženiu batérie	Pripojte nabíjací kábel k napájaniu zariadenia a nabite batériu

WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Záručné podmienky:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Pre uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky:

- Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.
- Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:
 - Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis.
 - Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).
 - Opotrebenie: Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).
 - Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.
 - Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Dovozca: LASER CUT s.r.o. 4.května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4. mája 2186 , 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: **Fascial gun / Masážna pištoľ**

Model / typ: **750 GLOX**

Vyššie uvedený výrobok, bol testovaný v súlade s normami použitými preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EÚ) 2011/65/EÚ & EÚ 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nesie označenie
CE:



Podpísaný:

Meno a funkcie:

Dátum a miesto:

Robert Fiala , Konateľ spoločnosti

2. Apríla , 2025 - Vsetín

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala R'.