

GLOX V1

masážní pistole



návod k použití



Děkujeme, že jste si vybrali spotřebič značky GLOX.

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Vážíme si vaší důvěry a doufáme, že budete s naším výrobkem spokojeni. Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte si tento návod k použití pro budoucí potřebu. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům, které jsou klíčové pro bezpečné a správné používání produktu. Pokud máte k přístroji jakékoliiv dotazy nebo připomínky, neváhejte se obrátit na naši zákaznickou linku. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme.

VAROVÁNÍ:

- Použijte speciálně přibalovaný USB kabel s 5V napájecím adaptérem pro nabíjení produktu.
- Nepoužívejte nabíječku s poškozeným krytem nebo nesprávným napětím, aby nedošlo k poškození jednotky.
- Nedotýkejte se nabíjecího kabelu a adaptéru mokřýma rukama a netahejte za kabel při odpojování nabíječky.
- Vyvarujte se kontaktu s produktem nebo nabíječkou mokřýma rukama, abyste předešli zkratu, poruše nebo úrazu elektrickým proudem.
- Přestaňte používat adaptér, pokud je vystaven dešti, kapalině nebo je silně vlhký.
- Tento produkt není určen pro lékařské účely, slouží pouze k osobní masáži.
- Určité osoby, jako jsou ty s kardiostimulátorem, srdečními chorobami, těhotné ženy, osoby s onemocněním zad, zlomeninami, osteoporózou, kloubními onemocněními, zhoubnými nádory, kožními poraněními nebo ekzémem, s cukrovkou s komplikacemi, jako je neuropatie nebo poškození sítnice, nedávná operace, epilepsie nebo migrény, hernie plotének, spondylolistéza, spondylolýza nebo spondylóza, nedávná náhrada kloubů, nitroděložních tělísek, kovových čepů nebo destiček nebo pokud existují jakékoli obavy o vaše fyzické zdraví by neměly produkt používat. Pokud máte zdravotní potíže, konzultujte použití s lékařem.
- Nevystavujte baterii vysokým teplotám nebo blízko topných zařízení, jako je sluneční záření nebo topidla, aby nedošlo k přehřátí a výbuchu.
- Nerozebírejte ani neupravujte baterie, nevkládějte cizí předměty a neponořujte je do vody, aby nedošlo k úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.
- Baterie by měly být bezpečně zlikvidovány v souladu s platnými předpisy.
- Nedovolte dětem nebo osobám bez autonomie obsluhovat a používat tento produkt. Umístěte jej mimo dosah dětí.
- Používejte pouze na suchém a čistém povrchu. Lze použít přes oblečení, jemně přitlačte a pohybujte po kůži, maximálně 60 sekund na každou část.
- Nepoužívejte na vrcholu hlavy nebo na tvrdých částech těla s kostmi. Pokud necítíte bolest nebo nepohodlí, používejte pouze na měkké tkáni těla.
- Nepoužívejte v oblastech s modřinami, bolestí nebo nepohodlím.
- Nestůjte ani nesedejte přímo na výrobek, aby nedošlo k pádu.
- Nadměrné používání může způsobit přehřátí a zkrátit životnost produktu. Nechte výrobek vychladnout před opakovaným použitím.
- Nepoužívejte ve vlhkém prostředí, jako je koupelna, a nevkládějte produkt do vody nebo jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.
- Neumísťujte výrobek blízko zdrojů tepla, nebo na přímém slunečním světle.
- Nevkládějte ani neupouštějte předměty do žádných otvorů výrobku.
- Nepřikrývejte masážní přístroj během používání, aby nedošlo k poruše způsobené zvýšením teploty motoru.
- Nedovolte, aby se prsty, vlasy nebo jiné části těla přiblížily k hřídeli a zadní části vibrační hlavy, aby nedošlo k jejich zachycení.

Indikace funkce

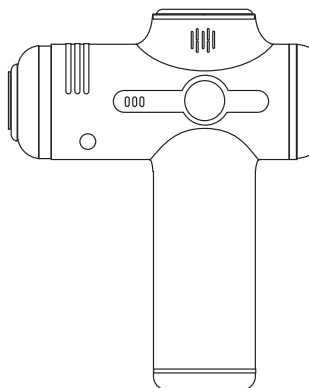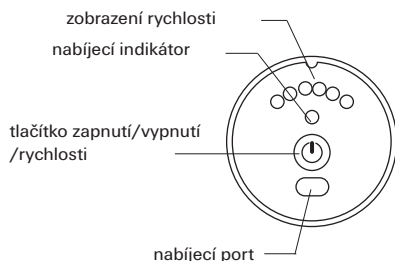

Funkce

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko zapnutí/vypnutí. Po rozsvícení kontrolky se stroj aktivuje a proces zapnutí je dokončen.

Přepínání rychlosti: Po zapnutí stroje můžete krátkým stisknutím tlačítka zapnutí zvýšit rychlost. Stroj postupně zvyšuje výkon od rychlosti 1 až po rychlost 6.

Vypnutí: Pokud je stroj nastaven na 6. rychlostní stupeň, krátkým stisknutím tlačítka zapnutí jej vypnete. Alternativně, v jakémkoli rychlostním stupni, můžete stroj vypnout tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí. Kontrolka zhasne, čímž je proces vypnutí dokončen.

POKYNY K BATERII

Doba nabíjení: Pro plné nabití baterie, která je zcela vybitá, je doporučeno nabíjet přibližně 3 hodiny.

Výdrž zařízení: Závisí na úrovni tlaku během používání, což ovlivňuje, jak dlouho zařízení vydrží na jedno nabití.

Nabíjecí příslušenství: Použijte speciálně vybavený nabíjecí kabel dodávaný se zařízením. Připojte jej k 5V adaptéru, který splňuje národní standardy a jehož výkon nepřesahuje 15W.

Indikace nabíjení:

Model s jedním tlačítkem (šest rychlostí): Při nabíjení svítí nabíjecí displej červeně. Po úplném nabití červené světlo zhasne.

Bezpečnostní upozornění: Nezapínejte zařízení během nabíjení, aby byla zajištěna vaše bezpečnost.

SPECIFIKACE

Název produktu	Masážní pistole
Model produktu	GLOX V1
Jmenovité napětí	7,4V
Jmenovitý výkon	18W
Nabíjecí napětí	5V
Nabíjecí proud	2A
Kapacita baterie	1200mAh
Doba nabíjení	2-3 hodiny
Výdrž baterie	až 4 hodiny
Nastavitelné úrovně	6 úrovní
Hmotnost	420 g

OBSAH BALENÍ

- Masážní pistole GLOX V1
- 6 masážních nástavců
- Kabel USB

POPIS A VYUŽITÍ MASÁŽNÍCH HLAVIC



Kulatá masážní hlavice

Pro masáž paží a dolních částí zad, velkých svalových skupin, jako jsou stehna, hýždě, lýtka.



Vidlicová masážní hlavice

Pro masáž krku, souběžně na obou stranách páteře pro masáž Achillovy šlachy



Plochá masážní hlavice

Vhodné pro masáž celého těla s uvolněním svalů



Hrotová masážní hlavice

Vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiány, klouby, dlaně, chodidla



Masážní hlavice - malá kulička

Vhodné pro hloubkovou masáž meridiánových akupunkturních bodů, k uvolnění.



Vhodné pro procvičování a relaxaci břišních svalů, paží a stehenní linie

ÚDRŽBA

1. Povrch zařízení otřete jemně vlhkým ručníkem a následně jej osušte měkkým hadříkem. Tím zajistíte, že na povrchu nezůstanou žádné stopy vlhkosti.
2. Při dlouhodobém skladování nebo cestování uložte produkt do původní krabice. Dbejte na to, aby zařízení zůstalo suché, což pomůže ochránit jej před poškozením a zachovat jeho funkčnost.

Řešení problému:

Problém	Možná příčina	Řešení problému
Pistole nejde zapnout	Vybitá baterie	Připojte nabíjecí kabel k zařízení a nabíjте baterii



WEEE

Tento výrobek nesmí být likvidován jako běžný domovní odpad v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (WEEE - 2012/19/EU). Místo toho musí být vrácen na místo nákupu nebo předán na veřejné sběrné místo recyklovatelného odpadu. Tím, že zajistíte správnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předejít možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nevhodným nakládáním s odpadem z tohoto výrobku. Další informace získáte na místním úřadě nebo na nejbližším sběrném místě. Nesprávná likvidace tohoto typu odpadu může mít za následek pokuty v souladu s vnitrostátními předpisy.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky. Pro uplatnění záruky je důležité dodržet následující podmínky:
Opravy a servis: V případě potřeby opravy nebo jiného servisu během záruční doby se obraťte přímo na prodejce výrobku. Je nezbytné předložit originální doklad o koupi s datem nákupu.

Podmínky, za kterých nelze reklamaci uznat:

Nesprávné použití: Používání výrobku k jinému účelu, než pro který je určen, nebo nedodržení pokynů pro údržbu, provoz a servis.

Poškození: Poškození způsobené živelnou pohromou, zásahem neoprávněné osoby nebo mechanickým poškozením vinou kupujícího (např. při přepravě nebo čištění nevhodnými prostředky).

Opotřebení: Přirozené opotřebení a stárnutí spotřebního materiálu nebo součástí během používání (např. baterie).

Vnější vlivy: Působení nepříznivých vnějších vlivů, jako je sluneční záření, elektromagnetické pole, vniknutí kapaliny nebo předmětu, přepětí v síti, elektrostatický výboj (včetně blesku), vadné napájecí nebo vstupní napětí, nevhodná polarita napětí, chemické procesy a podobně.

Úpravy a modifikace: Jakékoliv úpravy, modifikace nebo změny konstrukce výrobku, které mění jeho funkce oproti zakoupené konstrukci, nebo použití neoriginálních součástí.

.....
Dovozce: LASER CUT s.r.o., 4.května 2186, 755 01 Vsetín.

4.května 2186, 755 01 Vsetín
servis@laser-cut.cz
+420 777 307 776
.....

Prohlášení o shodě EU

Výrobce: LASER CUT s.r.o.
4. května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce/dovozce.

Produkt: Fascial gun/Masážní pistole

Model/typ: **V1 GLOX**

Výše uvedený výrobek, byl testován v souladu s normami použitými prokázání shody se základními požadavky stanovenými ve směrnicih.

Directive (EU) 2011/65/EU & EU 2015/863 & EU 2014/35

Příslušné harmonizované normy, na které se vztahuje shoda, jsou:

EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 60335-1:2012+A15:2021
EN 62233:2008
EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nese označení CE:

Podepsán:

Jméno a funkce:

Datum a místo:

CE

Robert Fiala, Jednatel společnosti

2. dubna, 2025 - Vsetín

Podpis



Vysvětlení symbolů:

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje mohou být použity následující symboly:

	Nebezpečí! Přístroj se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (umyvadlo, sprcha, vana) - nebezpečí zásahu elektrickým proudem.		Značka pro identifikaci obalového materiálu: A - zkratka materiálu B - číslo materiálu 1-7 plasty 20-22 papír a lepenka
	Přečtěte si pokyny.		Informace o výrobku Upozornění na důležité informace.
	Likvidace podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)		Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.		Značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Výrobce		Symbol dovozce

	Součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.		Produkt a součásti obalu roztřídte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.		Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci a splňuje tak třídu ochrany II.

 NEBEZPEČÍ	Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.
 VAROVÁNÍ	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.
 POZOR	Označuje možné hrozící nebezpečí, Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.
UPOZORNĚNÍ	Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození zařízení nebo předmětů v okolí.

