

MASÁŽNA PIŠTOL'

návod na použitie



Model: GLOX V1

Vážený zákazník,

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Vážime si vašu dôveru a dúfame, že budete s naším výrobkom spokojní. Pred prvým použitím si prosím pozorne prečítajte nasledujúce pokyny a uschovajte si tento návod na použitie pre budúce potreby.

Zvláštnu pozornosť venujte bezpečnostným pokynom, ktoré sú kľúčové pre bezpečné a správne používanie produktu. Pokiaľ máte k prístroju akékoľvek otázky alebo pripomienky, neváhajte sa obrátiť na našu zákaznícku linku. Sme tu pre vás a radi vám pomôžeme.

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt.


Údržba

1. **Povrch zariadenia utrite jemne vlhkým uterákom** a následne ho osušte mäkkou handričkou. Tým zaistíte, že na povrchu nezostanú žiadne stopy vlhkosti.
2. **Pri dlhodobom skladovaní alebo cestovaní uložte produkt do pôvodnej krabice** . Dbajte na to, aby zariadenie zostalo suché, čo pomôže ochrániť ho pred poškodením a zachovať jeho funkčnosť.

Varování

- Použite špeciálne pribalený USB kábel s 5V napájacím adaptérom na nabíjanie produktu.
- Nepoužívajte nabíjačku s poškodeným krytom alebo nesprávnym napätím, aby nedošlo k poškodeniu jednotky.
- Nedotýkajte sa nabíjacieho kábla a adaptéra mokrémi rukami a neťahajte za kábel pri odpájaní nabíjačky.
- Vyvarujte sa kontaktu s produktom alebo nabíjačkou mokrémi rukami, aby ste predišli skratu, poruche alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Prestaňte používať adaptér, ak je vystavený dažďu, kvapaline alebo je silne vlhký.
- Tento produkt nie je určený na lekárske účely, slúži len na osobnú masáž.
- Určité osoby, ako sú tie s kardiostimulátorom, srdcovými chorobami, tehotné ženy, osoby s ochorením chrbta, zlomeninami, osteoporózou, kĺbovými ochoreniami, zhubnými nádormi, kožnými poraneniami alebo ekzémom, s cukrovkou s komplikáciami, ako je neuropatia alebo poškodenie sietnice, nedávna operácia, epilepsia alebo migrény, hernia platničiek, spondylolistéza , spondylolýza alebo spondylóza , nedávna náhrada kĺbov , vnútromaternicových teliesok, kovových čapov alebo doštičiek . Ak máte zdravotné problémy, konzultujte použitie s lekárom.
- Nevystavujte batériu vysokým teplotám alebo blízko vykurovacích zariadení, ako je slnečné žiarenie alebo ohrievače, aby nedošlo k prehriatiu a výbuchu.
- Nerozoberajte ani neupravujte batérie, nevkladajte cudzie predmety a neponárajte ich do vody, aby nedošlo k úniku, prehriatiu, požiaru alebo výbuchu.
- Batérie by mali byť bezpečne zlikvidované v súlade s platnými predpismi.
- Nedovoľte deťom alebo osobám bez autonómie obsluhovať a používať tento produkt. Umiestnite ho mimo dosahu detí.
- Používajte iba na suchom a čistom povrchu. Možno použiť cez oblečenie, jemne pritlačte a pohybujte po koži, maximálne 60 sekúnd na každú časť.
- Nepoužívajte na vrchole hlavy alebo na tvrdých častiach tela s kosťami. Ak necítite bolesť alebo nepohodlie, používajte iba na mäkké tkanivá tela.
- Nepoužívajte v oblastiach s modrinami, bolesťou alebo nepohodlím.
- Nestojte ani nesadajte priamo na výrobok, aby nedošlo k pádu.
- Nadmerné používanie môže spôsobiť prehriatie a skrátiť životnosť produktu. Nechajte výrobok vychladnúť pred opakovaným použitím.
- Nepoužívajte vo vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa, a nevkladajte produkt do vody alebo iných kvapalín, aby nedošlo k skratu alebo úrazu elektrickým prúdom.
- Neumiestňujte výrobok blízko zdrojom tepla, alebo na priamom slnečnom svetle.
- Nepoužívajte prístroj počas búrky.
- Nevkladajte ani neupúšťajte predmety do žiadnych otvorov výrobku.
- Neprikrývajte masážny prístroj počas používania, aby nedošlo k poruche spôsobenej zvýšením teploty motora.
- Nedovoľte, aby sa prsty, vlasy alebo iné časti tela priblížili k hriadeľu a zadnej časti vibračnej hlavy, aby nedošlo k ich zachyteniu.

Indikácia funkcie

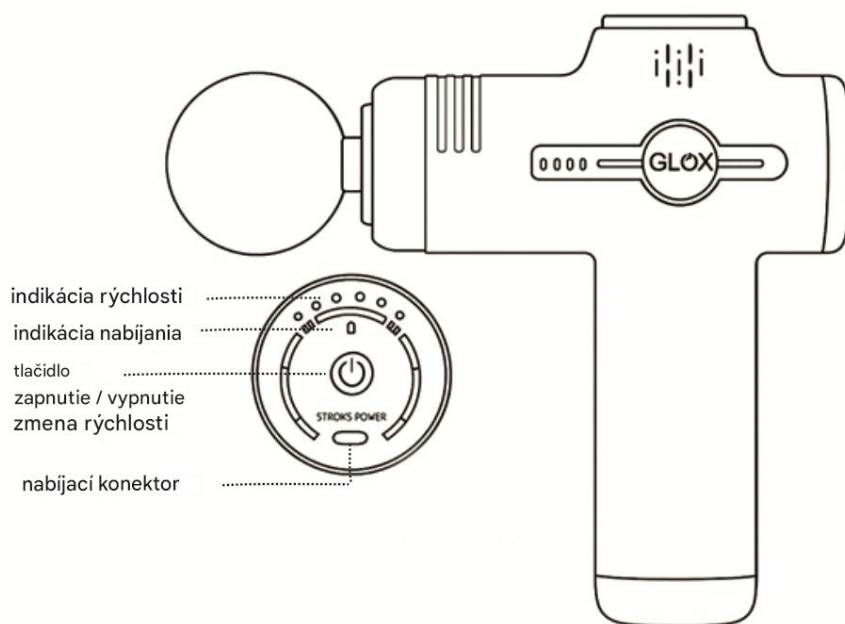

Funkcia

- **Zapnutie:** Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia. Po rozsvietení kontrolky sa stroj aktivuje a proces zapnutia je dokončený.
Prepínanie rýchlostí: Po zapnutí stroja môžete krátkym stlačením tlačidla zapnutia zvýšiť rýchlosť. Stroj postupne zvyšuje výkon od rýchlosti 1 až po rýchlosť 6.
- **Vypnutie:** Ak je stroj nastavený na 6. rýchlostný stupeň, krátkym stlačením tlačidla zapnutia ho vypnete. Alternatívne, v akejkoľvek rýchlostnom stupni, môžete stroj vypnúť tak, že stlačíte a podržíte tlačidlo zapnutia. Kontrolka zhasne, čím je proces vypnutia dokončený.

Pokyny k batérii

- **Doba nabíjania:** Pre plné nabitie batérie, ktorá je úplne vybitá, sa odporúča nabíjať približne **3 hodiny**.
- **Výdrž zariadenia:** Závisí na úrovni tlaku počas používania, čo ovplyvňuje, ako dlho zariadenie vydrží na jedno nabitie.
- **Nabíjacie príslušenstvo:** Použite **špeciálne vybavený nabíjací kábel** dodávaný so zariadením. Pripojte ho k **5V adaptéru**, ktorý spĺňa národné štandardy a ktorého výkon nepresahuje **15W**.
- **Indikácia nabíjania:**
 - **Model s jedným tlačidlom (šesť rýchlostí):** Pri nabíjaní svieti nabíjací displej **na červeno**. Po úplnom nabití červené svetlo **zhasne**.
 - **Model LCD s dvoma tlačidlami:** Keď je batéria vybitá, indikátor signalizuje potrebu nabitia. Počas nabíjania svieti indikátor **rovnomerne** a pri plnom nabití svieti **úplne**.
 - **Model s tromi tlačidlami:** Pri nabíjaní bliká svetlo na displeji **skákavým spôsobom**. Nabíjanie je dokončené, keď úroveň batérie ukazuje **"-"**.
- **Bezpečnostné upozornenie:** **Nezapínajte zariadenie počas nabíjania**, aby bola zaistená vaša bezpečnosť.

Parametre produktu

Model	V1
Menovité napätie	7,4V
Menovitý výkon	18W
Nabíjacie napätie	5V
Nabíjací prúd	2A
Kapacita batérie	1200mAh
Doba nabíjania	2-3 hodiny
Výdrž batérie	4-6 hodín
Nastaviteľné úrovne	6 úrovní
Hmotnosť	850g

Obsah balenia

- Masážna pištoľ GLOX 750
- 6 masážne nástavce
- Kábel USB

OPIS A VYUŽITIE MASÁŽNYCH HLAVÍC



Nástavec "T"

Procvičování a relaxace břišních svalů, paží a stehenní linie



Nástavec Nábojnice

vhodné pro masáž hlubokých tkání, jako jsou meridiány, klouby, dlaně, chodidla



Nástavec Malá kulička

vhodné pro hloubkovou masáž meridiánových akupunkturních bodů k uvolnění



nástavec Kulička

vhodné pro masáž paží a dolní části zad, velkých svalových skupin, jako jsou hýždě, stehna a lýtka



Nástavec "Y"

vhodné pro masáž krku souběžně na obou stranách páteře a pro masáž Achillovy šlachy



Nástavec Plochý

vhodné pro masáž celého těla s uvolněním svalů

Riešenie problémov

Model	Jav	Dôvod	Riešenie problémov
V1	nejde zapnúť prístroj	Ochrana proti preťaženiu batérie	Pripojte nabíjací kábel k napájaniu zariadenia a nabijte batérie

WEEE

Tento výrobok nesmie byť likvidovaný ako bežný domový odpad v súlade so smernicou EÚ o odpadových elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE - 2012/19/EÚ). Namiesto toho musí byť vrátený na miesto nákupu alebo odovzdaný na verejné zberné miesto recyklovateľného odpadu. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu tohto výrobku, pomôžete predísť možným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené nevhodným nakladaním s odpadom z tohto výrobku. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo na najbližšom zbernom mieste. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže mať za následok pokuty v súlade s vnútroštátnymi predpismi.



Záručné podmienky:

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky. Pre uplatnenie záruky je dôležité dodržať nasledujúce podmienky:

- Opravy a servis: V prípade potreby opravy alebo iného servisu počas záručnej doby sa obráťte priamo na predajcu výrobku. Je nevyhnutné predložiť originálny doklad o kúpe s dátumom nákupu.
- Podmienky, za ktorých nemožno reklamáciu uznať:
 - Nesprávne použitie: Používanie výrobku na iný účel, než na ktorý je určený, alebo nedodržanie pokynov pre údržbu, prevádzku a servis.
 - Poškodenie: Poškodenie spôsobené živelnou pohromou, zásahom neoprávnenej osoby alebo mechanickým poškodením vinou kupujúceho (napr. pri preprave alebo čistení nevhodnými prostriedkami).
 - Opatrebné: Prirodzené opotrebenie a starnutie spotrebného materiálu alebo súčastí počas používania (napr. batérie).
 - Vonkajšie vplyvy: Pôsobenie nepriaznivých vonkajších vplyvov, ako je slnečné žiarenie, elektromagnetické pole, vniknutie kvapaliny alebo predmetu, prepätie v sieti, elektrostatický výboj (vrátane blesku), chybné napájacie alebo vstupné napätie, nevhodná polarita napätia, chemické procesy a podobne.
 - Úpravy a modifikácie: Akékoľvek úpravy, modifikácie alebo zmeny konštrukcie výrobku, ktoré menia jeho funkcie oproti zakúpenej konštrukcii, alebo použitie neoriginálnych súčastí.

Dovozca: LASER CUT s.r.o.

Adresa: 4.května 2186, 755 01 Vsetín Česká republika

✉ servis@laser-cut.cz

☎ +420 777 307 776

Vyhlásenie o zhode EÚ

Výrobca: LASER CUT s.r.o.

4.května 2186 , 755 01 Vsetín Česká republika

Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu/dovozcu.

Produkt: Fascial gun / Masážna pištoľ

Model / typ: V1 GLOX

Vyššie uvedený výrobok, bol testovaný v súlade s normami použitými preukázanie zhody so základnými požiadavkami stanovenými v smerniciach.

Directive (EÚ) 2011/65/EÚ & EÚ 2015/863

Príslušné harmonizované normy, na ktoré sa vzťahuje zhoda, sú:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN 60335-1:2012+A15:2021

EN 62233:2008

EN IEC 60335-2-32:2021

Tento produkt nesie označenie CE:



Podpísaný:

Meno a funkcie:

Dátum a miesto:

Robert Fiala , Konateľ spoločnosti
2. Apríla , 2025 - Vsetín

Podpis:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Fiala R'.